



## 1 – HORAIRES DU LABORATOIRE

Jour	Technicien présent	Transfert des tubes vers Quimper	Ramassage
Lundi au vendredi	8h30 – 16h05	Navette	9h25 – 10h25 – 13h55
Samedi	8h30 – 16h05	Navette	10h25
Dimanche	<b>Fermé</b>	Taxi	10h30
Férié	8h30 – 16h05	Non sauf urgences	Appel au standard

## 2 – ACHEMINEMENT DES PRÉLEVEMENTS SUR LE SITE DE CONCARNEAU

a) Par la navette interne du lundi au vendredi :

Ramassage : à partir de 8h (tous les services)

Et 13h30 (SSR Locomoteur, SSR addictologie et maisons de retraite).


b) Manu-porté :

- Après le passage de la navette.

- Le week-end et jours fériés : chaque service achemine lui-même au laboratoire (cf horaires du labo ci-dessus).

## 3 – ANALYSES URGENTES REALISEES SUR CONCARNEAU

Les analyses urgentes ne figurant pas dans ce tableau sont transférées sur Quimper, **l'envoi est géré par le technicien de laboratoire (logiciel Ambre).**

Analyses réalisées par le technicien de CC	Prélèvement
Gazométrie (<30 mn à température ambiante, vol > 700µL et absence de bulles)	Artériel / Seringue GDS
Carboxyhémoglobine (HbCO) et Methémoglobine	Veineux ou artériel / Seringue GDS Tube hépariné (Vert <b>SANS gel</b> )
Hémoglobine	 Veineux ou artériel Seringue GDS
Ionogramme (Na, K, Cl)	
Glycémie	
Créatininémie – Calcémie LACTATES	
SGPT (ALAT/TGP), CPK, GGT, Lipase	Tube hépariné (Vert)
Troponine I	<b>Violet</b> ou Vert sans gel < 2h
CRP	<b>Violet</b> ou Vert sans gel < 3h
TP – INR (<24h)	<b>Bleu rempli</b>
TCA (<2h si HNF si non <6h)	
NFS – Plaquettes	<b>Violet</b>
Recherche de Toxiques urinaires	Urines (Tube beige)
β hCG (test rapide sur urine ou sérum)	Urines (Tube beige) Sérum (Tube jaune)

## 4 – LABORATOIRE FERMÉ

De 16h05 à 8h35 et le dimanche.

Si un férié tombe un dimanche : le laboratoire est fermé.

3-1) Transferts des analyses urgentes :

**C'est le service qui gère l'envoi vers Quimper (logiciel Ambre) après accord du biologiste**  
=> la demande est traitée par le standard (liste des taxis conventionnés).



Placer le prélèvement dans un sachet et une boîte de transport à température ambiante.

**3-2) Le dimanche :**

Déposer les prélèvements dans la glacière du laboratoire avant 10h30 (pièce 407).

**3-3) Microbiologie ( Se référer au manuel de prélèvement) :**

- **LCR et liquides articulaires** : seules urgences bactériologiques.

Transport à température ambiante (20°C).

En l'absence de technicien : traiter l'envoi sur « Ambre » et appeler au 02 90 94 42 95 / 02 90 26 44 77 si urgent.

- Hémocultures : se conservent 24h à température ambiante.

- ECBU : (monovettes vertes ou jaunes) se conserve 48h à température ambiante.




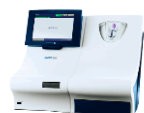




- Selles : se conservent 12h à +4°C.

- Autres prélèvements : à différer.

**3-4) Analyses réalisées en Biologie délocalisée :**

Réservé au personnel formé par le laboratoire

- IDE des Urgences : réalisent les analyses pour les patients des Urgences.
- Médecins des services : pour les patients des services de Médecine.

Analyses / prélèvement	Automate
Gazométrie,, HbCO, Methémoglobine Ionogramme (Na, K, Cl) Glycémie, Créatinine –Lactates-Calcémie 	ABL 
Troponine I, CRP 	AQT 
NFS, Plaquettes 	XS 1000i 
$\beta$ hCG (test rapide sur urine) 	Test rapide 

**4 – CONTACTS**

Biologiste référent : Dr Iann Dorval (4091)

Biologiste responsable qualité et pré-analytique : Dr Jean Marc Corvisier (4090)

Laboratoire de Concarneau : 4376 Réception des analyses à Quimper : 5354

Techniciens de garde sur Quimper (17h30-7h15) : 4476 & 4477